



## Warmkasten voor medisch gebruik

---



# Over Dörr Kampen

---

**De groeiende werkdruk in zorginstellingen en ziekenhuizen vereist hoogwaardige medische apparaten, die consistent en probleemloos functioneren en die voldoen aan strenge eisen van de gebruiker.**

Dörr Kampen is een expert in het combineren van kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak in betrouwbare medische apparatuur. Al vele jaren worden vanuit onze fabriek in Kampen, Nederland, apparaten voor zorginstellingen van topkwaliteit geproduceerd en wereldwijd geleverd.

Onze producten, zoals de kruikenmoeder, infuus- en dekenwarmhoudkasten en bedpanspoelers, zijn een integraal onderdeel van bijna elk ziekenhuis in Nederland. Overal ter wereld kunt u onze voorreinigingsapparatuur voor endoscopen en medische instrumenten vinden op sterilisatieafdelingen van ziekenhuizen en klinieken.

Met bijna een eeuw aan ervaring in de productie van medische apparaten kunnen wij met vol vertrouwen stellen, dat wij de specialist zijn in roestvaststalen apparaten en machinebouw voor de medische sector.

**U profiteert van onze uitgebreide kennis en betrouwbaarheid die we gedurende al die jaren hebben opgebouwd.**





# Dörr dekenwarmkasten

---

**Dörr dekenwarmkasten blinken uit in kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak.**

Door het gebruik van hoogwaardige materialen en bewezen elektronische componenten als basis, vormt de Dörr DKW dekenwarmkast een onmisbare aanvulling op herstelafdelingen in ziekenhuizen.

Steeds vaker wordt deze dekenwarmkast ingezet op afdelingen waar patiënten behoefte hebben aan extra comfort. Het aanbieden van een warme deken op afdelingen zoals hartbewaking, dialyse, recovery, chemotherapie of de traumakamer is van onschatbare waarde voor het bevorderen van het herstel van uw patiënten.

**Bij Dörr worden dekenwarmkasten altijd vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal**, wat zorgt voor duurzaamheid en hygiëne. Onze kleinere modellen, de Dörr DKW-40 en 50 zijn voorzien van een enkele draaideur die scharniert aan de linkerzijde. De Dörr DKW-60 is uitgerust met een dubbele draaideur.

Tevens kunnen Dörr dekenwarmkasten uitgevoerd worden als inbouwmodel



De Dörr DKW-2x5 is ontwikkeld als antwoord op de behoefte van grotere recovery-afdelingen. Deze dekenwarmkast is uitgerust met 2 afzonderlijk verwarmde compartimenten en voorzien van draaideuren die gemakkelijk sluiten dankzij het handige soft-close sluitsysteem.

Binnenin de kast worden de dekens geplaatst in uitneembare ABS draagmanden, waardoor het opbergen en organiseren van de dekens eenvoudig is. Het vullen van de draagmanden wordt vereenvoudigd door de ergonomisch geplaatste, telescopisch uitschuifbare werkbladen.

Hierdoor kunt u efficiënt werken en zorgdragen voor een geordende en goed geïntegreerde opslagoplossing voor dekens.



**Dörr dekenwarmkasten gebruiken een intern recirculatiesysteem om de warmte te verspreiden.**

Standaard worden onze dekenwarmkasten afgesteld op een temperatuur van 55 ° Celsius, maar bieden we de flexibiliteit om ze naar uw wensen binnen een ander temperatuurbereik in te stellen.

Afmetingen		Uitwendig	Inwendig
DKW-40	breedte	518	401
	diepte	605	478
	hoogte	900	725
DKW-50	breedte	618	498
	diepte	605	479
	hoogte	900	684
DKW-60	breedte	719	602
	diepte	605	475
	hoogte	900	725
DKW 2x5	breedte	985	420 (2x)
	diepte	805	607
	hoogte	2101	1650

#### Technische gegevens


- aan/uitschakelaar met indicatielamp
- digitale thermostaat/indicator
- Aansluitspanning: 230V~
- Aansluitwaarde: 530 / 1030 /2030 Watt
- 2006/42/EG
- materiaal RVS AISI 304

# Dörr infuuswarmkasten

**Dörr infuuswarmkasten onderscheiden zich door hun uitmuntende kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak.** Ze worden vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en bewezen elektronische componenten als basis, wat hem tot een onmisbare aanvulling maakt voor behandelafdelingen in ziekenhuizen.

De Dörr IFW infuuswarmkast is uitgerust met een geavanceerde digitale regeling en biedt een nauwkeurige temperatuurweergave. Dit maakt het een waardevol instrument voor verschillende ziekenhuizen en klinieken. In de operatiekamer wordt dit model vaak ingebouwd in de wand, maar kan ook op een frame of werkblad worden geplaatst.

De Dörr infuuswarmkast is ideaal voor het op temperatuur houden van cataracten, vloeistoffen, speculums of andere medische benodigdheden.

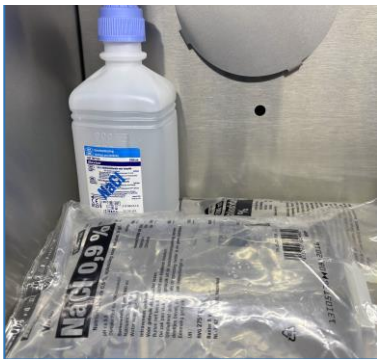

**Dörr infuuswarmkasten worden altijd geproduceerd uit hoogwaardig roestvast staal.**

De kleinere modellen IFW- 6 en 8 zijn voorzien van een links scharnierende draaideur. De overige modellen zijn voorzien van een dubbel schuifdeur. Af fabriek kan de warmkast uitgevoerd worden met een dichte - of een glazen deur.

De modellen met een glazen deur zijn voorzien van een interne kastverlichting.

DÖRR



**Dörr infuuswarmkasten worden verwarmd door middel van het recirculeren van warme lucht.** Af fabriek zijn deze infuuswarmkasten afgesteld op 37 ° Celsius, maar kunnen naar wens op een ander bereik ingesteld worden. Tevens kunnen de infuuswarmkast uitgevoerd worden als inbouwmodel.

Afmetingen		Uitwendig	Inwendig
IFW-6	breedte	383	320
	diepte	405	305
	hoogte	486	338
IFW-8	breedte	483	420
	diepte	405	305
	hoogte	486	338
IFW-10	breedte	583	520
	diepte	394	270
	hoogte	486	338
IFW-12	breedte	683	620
	diepte	394	270
	hoogte	486	338
IFW-14	breedte	783	720
	diepte	394	270
	Hoogte	486	338

#### Technische gegevens

- aan/uitschakelaar met indicatielamp
- digitale thermostaat/indicator
- Aansluitspanning: 230V~
- Aansluitwaarde: 225 / 425 Watt
- 2006/42/EG
- materiaal RVS AISI 304

## Dörr maatwerkproducten



**Bij Dörr Kampen bieden we een aantrekkelijk assortiment standaard warmkasten aan, die vaak direct uit voorraad leverbaar zijn.**

Wat ons onderscheidt, is het vermogen om onze producten op maat te optimaliseren voor uw specifieke situatie. Of het nu gaat om inbouw, het toevoegen van één of meerder lades, het maken van verrijdbare warmkasten, het ontwerpen van doorgeef-warmkasten of het realiseren van een specifieke bouwvormen. Voor ons is geen uitdaging te groot.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw specifieke behoeften te bespreken.

Bovendien bieden we de mogelijkheid om bij elk warmkastmodel een stevig roestvast stalen frame te bestellen, dat wordt aangepast aan de door u opgegeven hoogte.



Degelijk en  
Betrouwbaar

---



Dörr Kampen BV  
Haatlanderdijk 25  
Nederland  
8263 AN Kampen

Telefoon : +31 383 314 200  
E-Mail : [info@dorrkampen.nl](mailto:info@dorrkampen.nl)  
Website : [www.dorrkampen.nl](http://www.dorrkampen.nl)